



## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

### Система аппаратного похудения и моделирования фигуры Cavitone



#### СОДЕРЖАНИЕ

1. Техника безопасности .....	3
2. Об устройстве .....	3
3. Использование .....	4
4. Массаж рук .....	4
5. Массаж брюшной полости .....	5
6. Уход за лицом .....	5
7. Массаж ног .....	5
8. Массаж бедер .....	5
9. Массаж спины .....	6

#### 1. Техника безопасности



Не рекомендуется использовать устройство:

- Людям с поврежденной кожей;
- Страдающими кожными заболеваниями или аллергиями;
- Страдающим болезнью сердца, в особенности людям с кардиостимулятором;
- Больным раком;
- Людям с переломами конечностей;
- Беременным, кормящим женщинам, девушкам во время менструации;
- Людям с болезнями желудка и язвами, высоким давлением и диабетом.

Придерживайтесь следующих советов:

- Прежде чем наносить специальный гель или масло необходимо очистить кожу;
- Чистите устройство только влажной тряпкой, иначе инструмент может выйти из строя;
- Устройство может беспеременно работать в течении 1 часа, после необходимо выключить устройство на 10 минут, после чего вы можете использовать его снова.

#### 2. Об устройстве

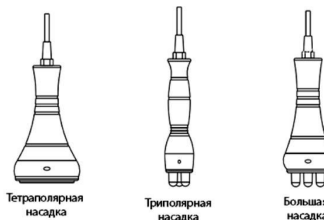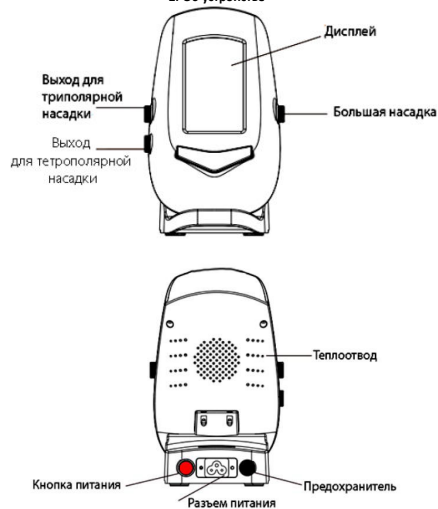

#### 3. Использование


- Подключите устройство к источнику питания;
- Нажмите кнопку питания, включите устройство;
- Нажмите «Enter», войдите в меню, выберите нужную функцию, настройте время работы, интенсивность, затем нажмите «Start». После завершения процедуры нажмите «Exit», выключите питание.



1. Триполярная насадка: Укрепление кожи, сжигание жира, лимфодренаж, вывод токсинов, улучшение циркуляции крови;
2. Тетраполярная насадка: Насадка для лица, способствующая укреплению кожи, улучшению эластичности кожи, расщеплению жировых клеток, выводу токсинов.
3. Насадка с большой головкой:
4. Расслабление мышц, улучшение кожи ступней, бедер, спины, талии, живота.


#### 4. Массаж рук

1. Проведите устройством от локтя до подмышки;
2. Круговыми движениями для стимуляции лимфоузлов;
3. Круговыми движениями против часовой стрелки или нажатием для сжигания жира;
4. Подтяжка кожи.

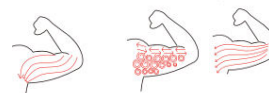


### 5. Массаж брюшной полости

Круговыми движениями по часовой стрелке. Помогает опорожнению кишечника.

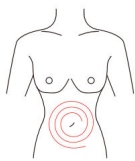


### 6. Уход за лицом

Проведите устройством по указанным на рисунке направлениям, чтобы разгладить морщины, подтянуть кожу.

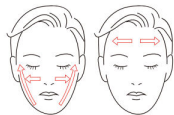

### 7. Массаж ног


1. От колена к паху для стимуляции лимфоузлов;
2. Круговыми вращениями против часовой стрелки для сжигания жира;
3. Вперед-назад для сжигания жира;
4. От голеностопа до колена, от колена до паха.

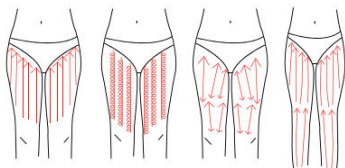

### 8. Массаж бедер


1. Вдоль лимфатической системы бедер;
2. Круговыми движениями вперед-назад.

5

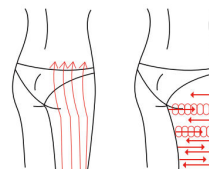

### 9. Массаж спины

1. Движениями вперед-назад, сверху-вниз;
2. Круговыми движениями для стимуляции лимфоузлов;
3. Круговыми движениями против часовой стрелки вверх-вниз для сжигания жира.

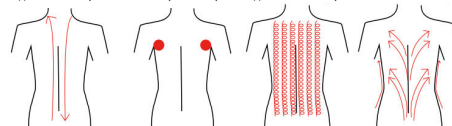

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр  
Контакт WhatsApp



Приятного использования!

Сайт: [minicam24.ru](http://minicam24.ru)  
Телефон бесплатной горячей линии: 8(800)200-85-66

6